

# Anti-Human von Willebrand Factor (vWF), Monoclonal (Clone VW92-3)

**Code No. M029**

**Size : 0.2 mg Mouse Ig**

**Subclass : IgG<sub>2a</sub>**

**Storage :** 4°C

This product does not contain preservative.

The stock solution (2.0 mg/ml) should be stored in aliquots at -20°C for 1 year, or should be stored at 4°C for 6 months after adding 0.1% sodium azide. Avoid repeated freeze-thaw cycles. Diluted antibody should not be stored.

\* 2 years from date of receipt under proper storage conditions.

## Application :

- Analysis of von Willebrand Factor in human plasma
- Refer to Table 2 for other applications.

## Applications

	Immunohistochemical detection		Western blot		Adhesion blockade
	Paraffin embedded tissue	Frozen section	Reduced antigen	Native antigen	
VW92-3	—	○	×	○	×

## Source :

Monoclonal antibody was obtained by fusing the mouse myeloma cell-line P3U1 with spleen cells of BALB/c mouse after immunization with human plasma von Willebrand Factor<sup>1)</sup>. The monoclonal antibody was harvested from ascitic fluid.

## Purification :

Antibody was purified by column chromatography, dissolved in 10 mM PBS, pH 7.4, containing 1.0% bovine serum albumin, and then lyophilized. The lyophilized antibody does not contain preservative.

**Form :** Lyophilized

## Reconstitution :

Dissolve the lyophilized antibody in 100  $\mu$ l of distilled water (final concentration: 2.0 mg/ml). This solution can be used as a stock solution. If dilution is necessary for your application, dilute the stock solution with the following Dilution solution just prior to use. When the entire amount of antibody is to be used over a short time period, it may be dissolved directly in 500  $\mu$ l or more of the Dilution solution.

Note (1) : Be sure to store the antibody at a minimum concentration of 2.0 mg/ml. A lower antibody concentration may result in decreased stability.

Note (2) : Reconstituted antibody solution should contain 0.1% sodium azide as a preservative when stored at 4°C.

**Dilution solution :** 10 mM PBS (pH 7.4)  
1.0% BSA  
(0.1% NaN<sub>3</sub>) \*

\* When stored at 4°C, 0.1% sodium azide should be added as a preservative.

## Specificity :

- This antibody specifically reacts with human vWF.
- This antibody does not react with bovine vWF.

The location of epitope

Clone	Location of epitopes (see Fig.1)
VW92-3	V8 protease fragment III N-termini Trypsin and Plasmin sensitive region

## Working concentration :

- 5 - 10  $\mu$ g/ml (For Western blotting by color detection)
- 5 - 10  $\mu$ g/ml (For immunohistochemical staining by color detection)

## References :

- 1) Fujimura Y, Titani K, Holland L Z, Russell S R, Roberts J R, Elder J H, Ruggeri Z M, and Zimmerman T S. *J Biol Chem.* (1986) **261**: 381-385.
- 2) Girma J-P, Chopek M W, Titani K, and Davie E W. *Biochemistry.* (1986) **25**: 3156-3163.
- 3) Fujimura Y, Miyata S, Nishida S, Miura S, Kaneda M, Yoshida A, Fukui H, Katayama M, Tuddenham E G D, Usami Y, and Titani K. *Thromb Haemostasis.* (1992) **68**: 464.

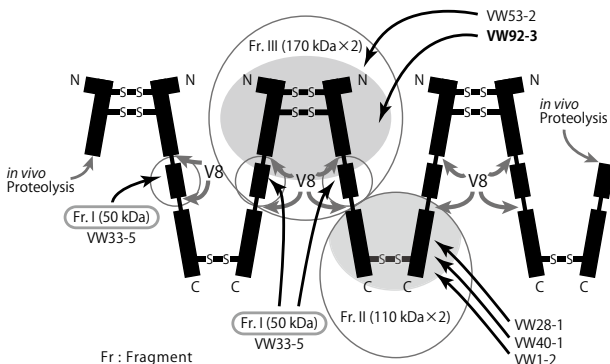


Figure 1.

vW Factor is a polymeric protein which is digested by V8 protease into 3 domains.

## Note

This product is for research use only. It is not intended for use in therapeutic or diagnostic procedures for humans or animals. Also, do not use this product as food, cosmetic, or household item, etc. Takara products may not be resold or transferred, modified for resale or transfer, or used to manufacture commercial products without written approval from Takara Bio Inc. If you require licenses for other use, please contact us by phone at +81 77 565 6973 or from our website at [www.takara-bio.com](http://www.takara-bio.com). Your use of this product is also subject to compliance with any applicable licensing requirements described on the product web page. It is your responsibility to review, understand and adhere to any restrictions imposed by such statements. All trademarks are the property of their respective owners. Certain trademarks may not be registered in all jurisdictions.

# Anti-Human von Willebrand Factor (vWF), Monoclonal (Clone VW92-3)

Code No. M029

Size: 0.2 mg Mouse Ig

Subclass: IgG2a

※ 適切に保存し、受取り後2年を目途にご使用ください。

## ●由来

ヒト血漿由来フォンビルブランド因子<sup>1)</sup>感作 BALB/c マウス脾臓細胞とマウス骨髄腫細胞 P3U1 を融合して得たハイブリドーマを、BALB/c マウスの腹腔内で増殖させて得られた腹水。

## ●製法

カラムクロマトグラフィーによりイムノグロブリン (IgG) として精製後、1.0%ウシ血清アルブミンを含む 10mM PBS (pH7.4) に溶解して凍結乾燥。防腐剤を含みません。

## ●形状

凍結乾燥品

## ●抗体の復元

100  $\mu$ l の純水で溶解する (2.0 mg/ml となる)。これをストック溶液とし、使用時に希釈が必要な場合は下記の希釈液を用いる。全量を使い切る場合は、500  $\mu$ l 以上の希釈液で直接溶解することもできる。

(注 1) 抗体濃度が低いと保存安定性が下がる可能性があるため、保存は必ず上記のストック溶液 (2.0 mg/ml) で行ってください。

(注 2) 復元した抗体溶液を 4°C で保存する場合は、防腐剤として 0.1% アジ化ナトリウムを添加してください。

## ●希釈液

10 mM PBS (pH7.4)  
1.0% ウシ血清アルブミン  
(0.1% アジ化ナトリウム)\*

\* : 4°C で保存する場合は防腐剤として加えてください。

## ●特異性

- ・ヒトフォンビルブランド因子と特異的に反応する。
- ・ウシフォンビルブランド因子とは反応しない。

## 認識部位

クローン	認識部位 (図 1 参照)
VW92-3	V8 プロテアーゼ断片 III を認識。 N 末端トリプシン、プラスミン感受性部位を認識

## ●使用抗体濃度

- ・ウェスタンブロッティング : 5 ~ 10  $\mu$ g/ml (発色法)
- ・免疫組織染色 : 5 ~ 10  $\mu$ g/ml (発色法)

## ●用途

- ・ヒト血漿中フォンビルブランド因子の解析

## その他の用途

	免疫組織染色		ウェスタンブロット		接着阻害
	パラフィン包埋切片	凍結切片	(還元)	(非還元非加熱)	
VW92-3	—	○	×	○	×

## ●保存 4°C

本製品は防腐剤を含んでいません。復元後のストック溶液 (2.0 mg/ml) は必要に応じて分注し -20°C 保存で 1 年、もしくは防腐剤 (0.1% アジ化ナトリウム等) を加えて 4°C 保存で 6 ヶ月を目途にご使用ください。凍結融解の繰り返しは避けてください。また、希釈後の保存はなるべく避けてください。

## ●参考文献

- 1) Fujimura Y, Titani K, Holland L Z, Russell S R, Roberts J R, Elder J H, Ruggeri Z M, and Zimmerman T S. *J Biol Chem.* (1986) **261**: 381-385.
- 2) Girma J-P, Chopek M W, Titani K, and Davie E W. *Biochemistry.* (1986) **25**: 3156-3163.
- 3) Fujimura Y, Miyata S, Nishida S, Miura S, Kaneda M, Yoshida A, Fukui H, Katayama M, Tuddenham E G D, Usami Y, and Titani K. *Thromb Haemostasis.* (1992) **68**: 464.
- 4) 千谷晃一、藤村吉博 実験医学 (1988) **6**: 31-34.

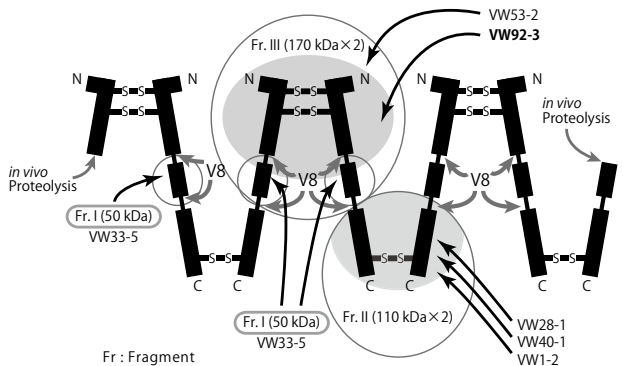


図 1. フォンビルブランド因子のドメイン構造と抗体の認識部位

## ●注意

本製品は研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。ライセンスに関する情報は弊社ウェブカタログをご覧ください。本データシートに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。

v201902Da

タカラバイオ株式会社

ウェブサイト <http://www.takara-bio.co.jp>

製品についての技術的なお問い合わせ先

テクニカルサポートライン

Tel 077-565-6999

Fax 077-565-6995